

Ficha Técnica

MANTA AQUEC.P/DESTILACAO 500 ML MOD.52-115V - código: 000521

MANTA AQUEC.P/DESTILACAO 500 ML MOD.52-230V - código: 000522

Descrição complementar:

Manta Aquecedora com capacidade de 500 ml, até 300 °C para balões de fundo redondo com diâmetro de 105mm modelo 52.



Manta internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com resistência incorporada, externamente em alumínio com pintura em epóxi eletrostático, isolamento térmico que permite ótimo rendimento, segurança e economia de energia, distribuição homogênea do calor, devido ao projeto bem elaborado, trazendo um melhor rendimento no aquecimento e evitando quebra de balões, elemento de aquecimento de fácil substituição.

- Manta aquecedora modelo 52 - classe 300;
- Capacidade: 0,500ml;
- Tipo de recipiente para uso: Balão fundo redondo em vidro*;
- Diâmetro do balão: 105mm;
- Norma do balão** : ISO 1773 e ASTM 1403;
- Temperatura de operação: Máx. 300°C;
- Controle de temperatura: Não;
- Potência de aquecimento: 200W;
- Frequência: 50-60Hz;
- Tensão de alimentação: Mod. 115V de 110 a 140V; Mod. 230V de 210 a 240V;
- Lâmpada piloto: Sim;
- Peso do produto: 0,9 kg;
- Peso do produto embalado: 1,3 kg;
- Dimensões : (Diâm. x Alt.);
- Dimensões da embalagem: 19x22,5x12,8 cm (LxPxA);
- Para maior durabilidade utilizar o regulador de potência mod. 407 ou regulador de temperatura mod. 411.

***Atenção ! Esta Manta aquecedora Fisatom, é fabricada para balões de fundo redondo com dimensões de acordo com as normas ISO 1773 e ASTM 1403. Se forem utilizados balões diferentes destas normas a responsabilidade é toda do cliente.**

* Utilizável somente com esta dimensão do recipiente

** Não utilizar com balões que não atendam as normas acima

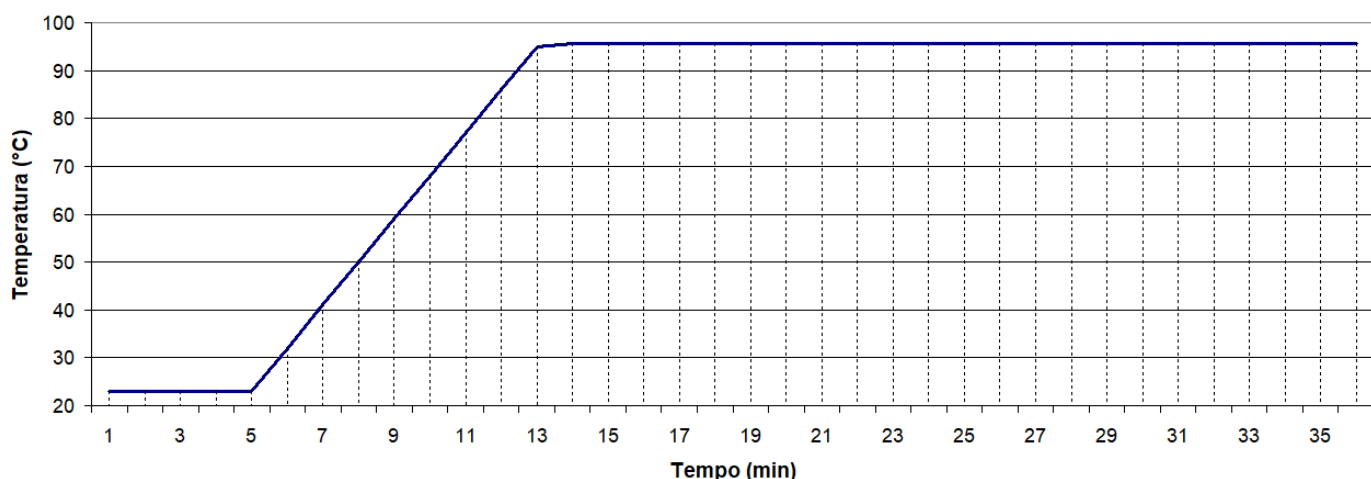


Gráfico de tempo obtido no aquecimento de água com 50% da capacidade do balão até a ebulição a 750m de altitude.

OPCIONAIS



Regulador de potência
Mod. 407
 – cód. 000407 – 115V~230V



Regulador de temperatura
Mod. 411
 – cód. 411S31 – 115V
 – cód. 411S32 – 230V



Splash Guard
 Protetor contra respingos
 – cód. 100.550 – 52