



modelo 562



modelos 572, 578 e 588

Banhos retangulares

Controle digital

Os banhos Fisatom são feitos de alumínio com acabamento em epóxi, com isolamento térmico e cuba em aço inox 304 sem emendas, com canto arredondado. Controle de temperatura digital por sistema PID, alarme, offset e autotuning (adéqua o controle de aquecimento a um processo específico). Indicados para utilizar com óleo ou água destilada.

Contate-nos




(11) 3864-1333

(11) 96477-1333

vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br

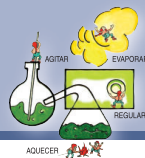

Especificações

Modelo	562	572	578	588
Capacidade	6 L	20 L	20 L	28 L
Dimensões externas (L x P x A)	24 x 41 x 23 cm	59 x 41 x 22 cm	59 x 41 x 22 cm	60 x 41 x 28 cm
Dimensões úteis (sem plataforma interna) (L x P x A)	15 x 29 x 15 cm	49 x 29 x 15 cm	49 x 29 x 15 cm	49 x 29 x 20 cm
Dimensões úteis (com plataforma interna) (L x P x A)	15 x 29 x 12 cm	49 x 29 x 12 cm	49 x 29 x 12 cm	49 x 29 x 18 cm
Potência	900 W	1.400 W	2.100 W	2.100 W
Faixa de temperatura	(ambiente +5) até 95 °C	(ambiente +5) até 95 °C	(ambiente +5) até 175 °C	(ambiente +5) até 175 °C
Plataforma interna e dreno	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Tampa de cobertura	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Tampa 6 bocas	n/d	Opcional	Opcional	Opcional
Estante para tubos de ensaio	Opcional	Opcional	n/d	n/d
Número de estantes	1	4	n/d	n/d
Controle de temperatura	Digital	Digital	Digital	Digital
Resolução	± 0,1 °C	± 0,1 °C	± 0,1 °C	± 0,1 °C
Estabilidade (depende de circulação)	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Certificado de calibração rastreável RBC	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Tensão de utilização	115 ou 230 V, 50 ou 60 Hz	115 ou 230 V, 50 ou 60 Hz	230 V, 50 ou 60 Hz	230 V, 50 ou 60 Hz
Peso	5,6 kg	8,1 kg	8,1 kg	9,2 kg
Código em 115 V	005621	005721	n/d	n/d
Código em 220 V	005622	005722	005782	005882


Acessórios

Tampa de cobertura **(Incluso)**



Com altura de 6 cm:
cód. 260.470 (**mod. 562**)
e cód. 260.450 (demais modelos)

Estante para tubos de ensaio **(Opcional)**

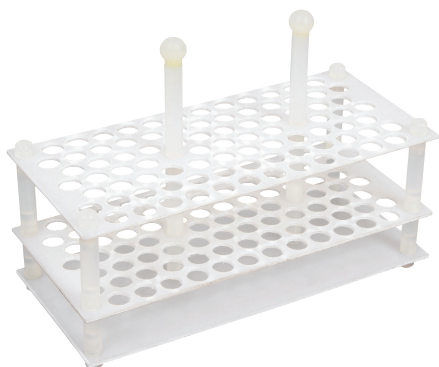

Para 21 tubos de 16 a 20 mm – cód. 200.270
Para 48 tubos de 14 a 15 mm – cód. 200.280
Para 81 tubos de 10 a 12 mm – cód. 200.290

Tampa de 6 bocas **(Opcional)**



cód. 260.440
Com reduções de diâmetro 10,5; 8,6;
6,4 e 3,6 cm, em todas as bocas