



modelo 772



modelo 774D

Agitador de Tubos

Tipo vortex

Os Agitadores Vortex Fisatom foram desenvolvidos para misturar substâncias em tubos por movimento orbital horizontal. Composto por plataforma de agitação em Viton, corpo em policarbonato, base de alumínio compacta, pés antiderrapantes em PVC. Seu motor é acionado por pressão e cria um vortex dentro do recipiente, mas também pode funcionar continuamente. Funcionamento perfeito para criar uma forte agitação rapidamente, evitando esforço manual do operador, prevenindo lesões por esforço repetitivo (LER). Design projetado para dificultar a entrada de líquidos no interior.

Contate-nos




☎ (11) 3864-1333

📞 (11) 96477-1333

✉ vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br

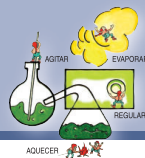

Especificações

Modelo	772	774D
Tipo de movimento	Orbital horizontal	
Diâmetro orbital	6,2 mm	4 mm
Tubo de ensaio	de 5 a 20 ml	10 a 100 ml
Acionamento	Contínuo ou por pressão	Contínuo ou por aproximação
Controle de rotação	n/d	Sim
Rotação	2.800 r/min	3.000 r/min
Dimensões	15 x 15 x 15 cm	15 x 15 x 4 cm
Consumo	40 W	20 W
Grau de proteção	IP42	IP 42
Peso	2,3 kg	1,3 kg
Frequência	50–60 Hz	
Tensão	115 ou 230 V	Bivolt
Código em 115 V	007721	-
Código em 230 V	007722	-
Código Bivolt	-	00774D