



Mantas aquecedoras – até 1 litro

Até 300°C com regulador de potência

Para utilização com balões de fundo redondo. Regulador de potência eletrônico para temperaturas de até 300°C, confeccionada em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com resistência incorporada, externamente em alumínio com pintura em epóxi eletrostático, isolamento térmico que permite ótimo rendimento, segurança e economia de energia, distribuição homogênea do calor, trazendo um melhor rendimento no aquecimento e evitando quebra de balões, elemento de aquecimento de fácil substituição.



Esta Manta aquecedora Fisatom é fabricada para balões de fundo redondo em vidro com dimensões de acordo com as normas ISO 1773 e ASTM 1403. As mantas Fisatom devem ser utilizadas com os balões de acordo com essas normas, o uso de balões fora das normas implica a perda da garantia.

Contate-nos




☎ (11) 3864-1333

📞 (11) 96477-1333

✉ vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br

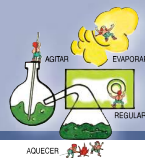

Especificações

Modelo	11E	12E	22E	52E	102E
Capacidade do balão (ml)	50	125	250	500	1.000
Ø balão (mm)	51	69	86	105	131
Splash Guards (opcional)	100.540			100.550	
Potência total (W)	60	80	135	200	330
Peso (Kg)	1	1	1,17	1,17	1,26
Dimensões (cm)	Ø 16,6 x 12	Ø 16,6 x 12	Ø 18,5 x 12,8	Ø 18,5 x 12,8	Ø 21 x 13,2
Tensão (V)	115 ou 230				
Frequência (Hz)	50–60				
Código 115V	0011E1	0012E1	0022E1	0052E1	0102E1
Código 230V	0011E2	0012E2	0022E2	0052E2	0102E2

Tempo de aquecimento das mantas aquecedoras

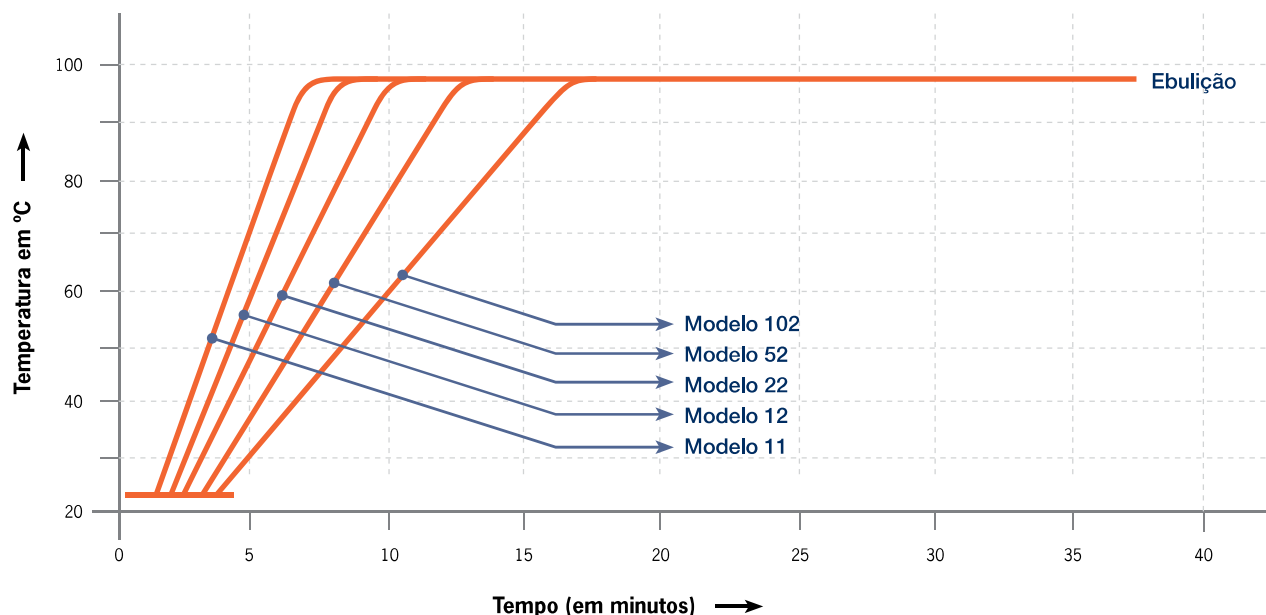


Gráfico de tempo obtido pelo aquecimento de água com 50% da capacidade do balão até a ebulição a 750m de altitude. (Mantas Classe 300)

Recomendamos o uso do protetor contra respingos “Splash Guards” (opcional)

Protetor contra respingos confeccionado em silicone, para ser utilizado sobre as mantas aquecedoras, ajuda a prevenir danos por derramamento de produtos químicos no interior do equipamento e melhora a segurança operacional quando se trabalha com produtos inflamáveis.

Temperatura máxima suportada: 200 °C



Modelo	Para uso nos modelos de mantas aquecedoras
100.540	12E, 22E, 12M, 22M, 27R, 47R
100.550	52E, 102E, 52M, 102M, 107R, 207R, 102-6, 102-3
100.510	202R, 202M, 302R
100.560	642R, 652R, 602R
100.570	1212R, 1202R
100.580	2422R, 2402R
100.610	22-3, 22-6, 52-3, 52-6